

Economic II – Das preiswerte Pflegebett

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Seitengitter Schutzhöhe von ca. 40 cm




Handschalter mit selektiver Sperrfunktion (Einzelsperrungen)



Fußtieflagerung

Äußerst stabile Seitengitterkonstruktion

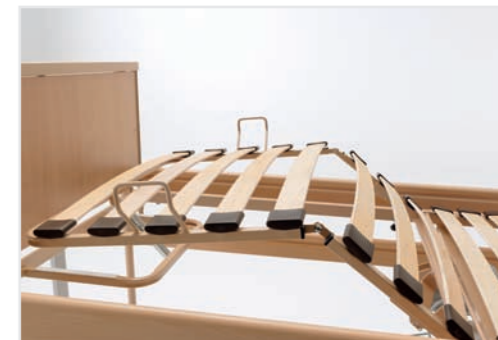

Unterschenkellehne durch Rastomat anhebbar (Zubehör gegen Mehrpreis)



Hochwertige und robuste Tente-Qualitätsrolle

Wartungsarmes und langlebiges Linak-Antriebssystem



Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern

• Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett "Economic II" ist äußerst stabil konstruiert, so dass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

• Wirtschaftlichkeit / Einfache Montage durch eine Person

Das Preis-/Leistungsverhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier Qualitätsphilosophie. Das Pflegebett ist durch eine Person, ohne Werkzeug, montierbar und demontierbar – und dies innerhalb weniger Minuten!

• Seitengitterschutzhöhe ca. 40 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 16 - 18 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitengittererhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

Pflegebett „Economic II“



Pflegebett „Economic II“

> Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, Liegehöhenverstellung von ca. 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Kopf- und Fußteilfüllungen in Buche Dekor. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.

Gefertigt nach:

- > Norm DIN EN 1970:2000 + A1:2005
- > Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001 (reduziert auf die Belange der Hauspflege)
- > Norm IEC 60601-2-52:2009

> Bestell-Nummern

51.0714.33	Pflegebett „Economic II“ (Holzseitengitter)
19.1400.1	Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

> Maße

Länge 212 cm, Breite 101 cm

> Zubehör (gegen Mehrpreis)

ohne Abbildung: Serviertablett



Holzfüllung zur Verkleidung des Fahrgestells (auch nachträglich montierbar)




Unterschenkellehne durch Rastomat anhebbar (Rastomat auch nachträglich montierbar)



Aufsteckbarer Seitengitterholm



Leselampen

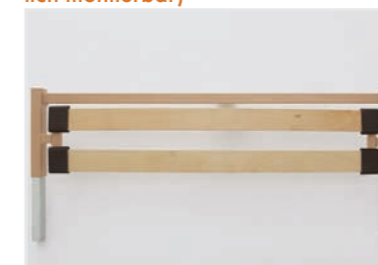

Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar)



Schaumlederbezug